

## Důležité bezpečnostní pokyny

Při používání elektrických přístrojů dbejte na bezpečnostní pokyny níže.

Prosím přečtěte si pozorně všechny instrukce před používáním tohoto přístroje.

**NEBEZPEČÍ ELEKTRICKÉHO ŠOKU:** Pro snížení rizika elektrošoku se řiďte se těmito instrukcemi:

Po použití nebo při čištění přístroje ho odpojte ze zásuvky.

**UPOZORNĚNÍ:** Pro snížení rizika požáru, popálenin, elektrického šoku nebo zranění ostatních osob, řiďte se těmito pokyny:

1) Pokud přístroj není v užívání, odpojte ho ze zásuvky.

2) Pro zabránění rizika požáru, elektrošoku nebo zranění z důvodu přehřátí, nepoužívejte přístroj pod polštářem nebo příkrývkou

3) Pokud je přístroj používán nebo je v přítomnosti dětí, osob s fyzickými a mentálními postiženími, musí být o přístroji poučené.

4) Používejte přístroj v souvislosti k jeho účelu popsanému v návodu. Nepoužívejte náhradní díly, které nejsou přímo doporučeny výrobcem.

5) Nepoužívejte přístroj, pokud nastane některý z těchto případů: Napájecí kabel nebo jeho zásuvka je poškozena, přístroj funguje abnormálně, pokud spadl z výšky na zem nebo byl poškozen a pokud se ponořil do vody.

6) Nepoužívejte napájecí kabel pro manipulaci s přístrojem.

7) Napájecí kabel držte v bezpečné vzdálenosti od horkých povrchů.

8) Nepoužívejte přístroj pokud je vývod vzduchu ucpán. Udržujte vývod vzduchu čistý od nečistot .

9) Nevkládejte žádné objekty do otvorů na přístroji.

10) Nepoužívejte přístroj venku.

11) Nepoužívejte přístroj v oblasti, kde se používají aerosolové spreje.

12) Pro odpojení, vypněte funkce přístroje a odpojte ho ze zásuvky.

13) Pokud chtějí přístroj použít děti, osoby s psychickým nebo mentálním postižením, musí je o použití přístroje poučit zodpovědná osoba.

14) Ujistěte se, že děti nepoužívají přístroj pro zábavu.

## Instrukce - čtěte před použitím

\*Pokud máte obavy o své zdraví, konzultujte použití přístroje se svým lékařem.

\*Pokud máte potíže se srdcem, konzultujte použití přístroje s lékařem.

\*Nedovolte dětem používat přístroj o samotě.

\*Nepoužívejte přístroj na stejné pozici déle než 15 minut.

\*Zdlouhavé používání může vést k přehřívání a zkrácení životnosti přístroje. Pokud to nastane, nechte přístroj dochladit.

\*Nepoužívejte přístroj přímo na oteklou a zanícenou pokožku.

\*Tento přístroj není profesionální zařízení a nelze ho použít jako náhradu za léky.

\*Nepoužívejte přístroj před spaním, přístroj poskytuje stimulující efekt, který může prodloužit dobu usnutí.

\*Nepoužívejte produkt pokud trpíte problémy s pohybovostí nebo ochrnutím spodních končetin.

\*Při používání přístroj dětmi nebo osobami s postiženími musí být přítomna dospělá osoba.

\*Povrch přístroje se zahřívá, osoby s omezeným vnímáním tepla musí dbát zvýšené opatrnosti.

## Technické parametry

Udávaný příkon: 24W

Napětí: 12V DC

## Návod k použití

1) Připravte polštář na místo, kde budete provádět masáž.

2) Připojte přístroj do zásuvky, přístroj vstoupí do pohotovostního režimu.


3) Stiskněte tlačítko „zapnutí / vypnutí“ pro zapnutí masáže

4) Po stisku tlačítka se symbolem tepelných vln pro přepnutí Hřejivé masáže. Po opětovném stisknutí se Hřejivá masáž vypne.

5) Stiskněte tlačítko se symbolem šipek pro změnu směru pohybu masážní hlavy.

6) Stisknutím tlačítka se symbolem grafu pro výběr intenzity masážní hlavy.

7) Stisknutím tlačítka „zapnutí / vypnutí“ pro vypnutí masážní funkce, přístroj vstoupí do pohotovostního režimu

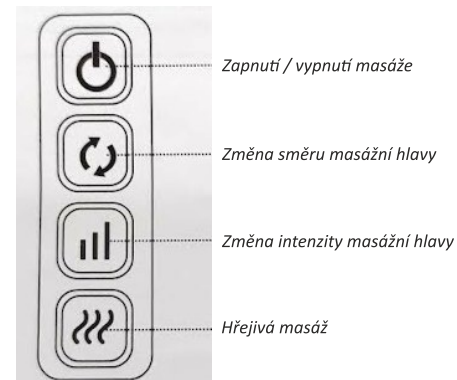

## Údržba

1) Pro každodenní čištění používejte neutrální čistič a jemný hadřík na otření. Nepoužívejte agresivní čističe.

2) Pokud je napájecí kabel poškozen, opravu musí provést profesionál.

3) Pokud se přístroj nepoužívá nebo se čistí, musí být odpojen od sítě.

4) Nepoužívejte ostré předměty, aby nedošlo k poříznutí povrchu přístroje.

5) Neskladujte přístroj ve vlhkém prostředí. Skladujte ho v suchém a odvětrávaném místě.

6) Nevytvírejte na přístroj nadměrný tlak.

## Řešení potíží

1) Přístroj se nezapíná.

- ujistěte se, že je přístroj správně zapojený do zásuvky

- stiskněte tlačítko pro zapnutí

2) Přístroj přestal z ničeho nic masírovat

- zkontrolujte, zda není přístroj odpojený ze zásuvky

- nechtěně stisknutí tlačítka pro vypnutí

- překročení času masáže pro automatické vypnutí

- ochrana proti přehřátí, pokud přístroj nelze spustit ani po dochlazení, dále ho raději nepoužívejte