

## PR 3025 - Čistič pórov

Ďakujeme Vám, že ste si vybrali náš výrobok. Dúfame, že zo spotrebičom budete spokojní.

Dôležité informácie týkajúce sa vašej bezpečnosti sú zvýraznené a rozlíšené. Aby ste predišli nehodám a zabránili poškodeniu prístroja, je nevyhnutné postupovať podľa týchto pokynov: **VÝSTRAHA:** Vás varuje pred nebezpečenstvom pre vaše zdravie a možným rizikom poranenia. **POZOR:** Toto sa týka možného nebezpečenstva poškodenia zariadení alebo iných predmetov. **POZNÁMKA:** Zvýrazňuje rady a informácie.

### VŠEOBECNÉ POZNÁMKY

- Pred uvedením zariadenia do prevádzky si pozorne prečítajte návod na obsluhu a uschovajte si pokyny vrátane záruky, príjmu a pokiaľ možno aj škatule s vnútorným obalom. Pokiaľ tento prístroj dáte ostatným osobám, dajte im aj návod na obsluhu.
- Prístroj je určený len na súkromné účely a pre zamýšľaný účel. Tento spotrebič nie je vhodný pre komerčné použitie.
- Nepoužívajte ho vonku. Uchovávajte ho mimo dosahu zdrojov tepla, priameho slnečného svetla, vlhkosti (nikdy ho neponárajte do žiadnej kvapaliny) a ostrých hrán. Prístroj nepoužívajte s mokrymi rukami. Pokiaľ je spotrebič vlhký alebo mokrý, okamžite ho odpojte od siete.
- Pri čistení alebo odkladanie spotrebiča vypnite a vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky (ťahajte za zástrčku, nie za kábel), ak spotrebič nepoužívate a vyberte pripojené príslušenstvo.
- Nepoužívajte spotrebič bez dozoru. Ak opustíte miestnosť, mali by ste prístroj vždy vypnúť. Vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Prístroj a sieťový prívod musí byť pravidelne kontrolované, či nie sú poškodené. Ak sa zistí poškodenie, nesmie sa spotrebič používať.
- Používajte len originálne náhradné diely.
- Pre zaistenie bezpečnosti detí uchovávajte všetky obaly (plastové vrecká, krabice, polystyrén atď.) Mimo dosahu.

**VÝSTRAHA:** Nenechávajte deti, aby sa hrali s fóliou. Nebezpečenstvo udusenia!

## Špeciálne bezpečnostné pokyny pre TOTO ZARIADENIE:


- VÝSTRAHA riziko úrazu elektrickým prúdom: • Udržujte prístroj v suchu! • Udržujte sieťový adaptér suchý. • Nenabíjajte spotrebič v blízkosti vaní, umývadiel alebo iných nádob s vodou. • Prístroj nabíjajte na chladnom a suchom mieste. • Prístroj je určený pre použitie s bezpečným nízkym napätím. Pripojte iba napájací zdroj podľa špecifikácie na typovom štítku. • Ak dôjde k poškodeniu napájacieho adaptéra, musí byť vymenený za ekvivalentný, ktorý je k dispozícii u výrobcu alebo u servisného strediska výrobcu.
- Nenahrádzajte žiadne diely. Nerobte žiadne úpravy. Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!
  - Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 12 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo osoby s nedostatočnými skúsenosťami a nedostatkom znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli vyškolení a chápu možné riziká. • Deti sa s prístrojom nesmie hrať.
  - Čistenie a údržbu užívateľa nesmú vykonávať deti bez dozoru.
  - Nepoužívajte iný ako dodaný napájací adaptér.
  - Prístroj obsahuje lítium-iónový akumulátor.
  - Nebezpečenstvo výbuchu v prípade nesprávnej výmeny dobíjacie batérie. Nahradte iba rovnakým alebo ekvivalentným typom.
  - Nevystavujte dobíjajúcu vstavanú batériu silným nárazom alebo tlaku. Spotrebič nenechajte spadnúť!
  - Nevystavujte prístroj silnému teplu, napríklad slnečnému žiareniu. Udržujte prístroj mimo dosahu zdrojov tepla, ako sú radiátory, kachle atď.!
  - Teplota okolia by mala byť medzi 0 ° C a 35 ° C. Teplota poškodzuje nabíjateľnú batériu. Stále nižšie teploty znižujú kapacitu a životnosť akumulátora.
  - Nenabíjajte akumulátor bez dozoru.
  - Ak je nabíjanie ukončené, odpojte napájací adaptér zo zásuvky.

### Rozsah dodávky

- 1 × Zariadenie
- 4 × Príslušenstvo
- 4 × Malé tesniace krúžky (1 už zmontovaný)
- 5 × Veľké tesniace krúžky (2 už zmontované)
- 17 × Filtračné hubky (1 už zmontovaná)

### Prehľad komponentu

1. Uzáver
2. Príslušenstvo
3. Malý tesniaci krúžok
4. Filtračná hubka
5. Veľký tesniaci krúžok
6. On / Off prepínač
7. Kontrolka
8. Spotrebič
9. Konektor
10. Nástavec pre redukciu viditeľných veľkých pórov; pomáha tak odstraňovať nečistoty a čierne bodky
11. Nástavec pre hladšia, pevnejšia a pevnejšiu pokožku
12. Nástavec pre čistenie pórov
13. Nástavec pre jemné odlupovanie; odstraňuje chyby a kožné šupiny

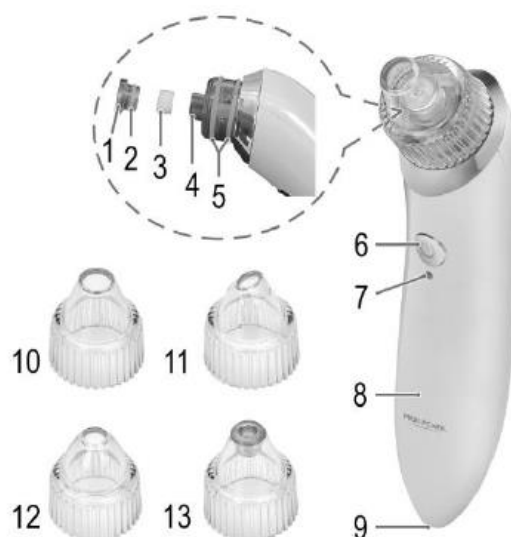

Nie je na ilustrácii: napájací adaptér, nabíjací kábel (USB typ A - USB 2.0 Micro-B)

Na čo môžem zariadenie používať?

Prístroj je vhodný pre použitie na kožu tváre (okrem oblasti okolo očí a oblasti okolo pier). Vzhľadom k tomu, že epidermálna vrstva kože sa v priebehu rokov stenčuje, objavuje sa hrubá koža a známky poškodenia. Tento prístroj bol vyvinutý tak, aby pôsobil proti prvým známkam starnutia pokožky tváre. Prístroj používajte na čistenie, odlupovanie a masáže pokožky tváre. Pri pravidelnom používaní môžete dosiahnuť zlepšené pleti.

Čo by ste mali mať na pamäti pri používaní spotrebiča?

- Nepoužívajte spotrebič bez príslušenstva.
- Pred každým použitím otestujte príslušenstva. Prístroj nepoužívajte s poškodeným alebo znečisteným nástavcom. Poškodená príloha môže poškodiť kožu.
- Aby nedošlo k poškodeniu pokožky alebo spotrebiče, nepoužívajte v kombinácii s prístrojom krémy a chemické prípravky.
- Spotrebič používajte maximálne dvakrát týždenne. Častejšie používanie môže spôsobiť podráždenie kože.
- Prístroj nepoužívajte príliš dlho. Akonáhle sa objavia prvé známky podráždenia kože, okamžite prerušte používanie.
- Je dôležité, aby spotrebič zostal v neustálom pohybe, keď je v kontakte s pokožkou a aby nebol držaný na jednom mieste. Týmto spôsobom sa vyhnete podráždeniu kože alebo dokonca hematómom.
- Nepoužívajte prístroj, ak je tvár mokrý, vo vani alebo v sprche.
- Pre urýchlenie regenerácie pokožky nepoužívajte prístroj na iný účel ako na masáž a jemnému odstráneniu vonkajšej, odumretej vrstvy kože.
- Po použití spotrebiča vaše sa pleťové krémy a tvárovej masky lepšie absorbujú. Môžu sa však vyskytnúť negatívne kožné reakcie. Odporúčame, aby ste nemali krém, ktorý používate počas prvých 2 - 4 týždňov. Ak po tejto dobe použijete nový krém, najprv ho otestujte na malej ploche. Ak sa po použití spotrebiča objavia negatívne kožné reakcie, nepoužívajte tento krém. Po prerušení prevádzky trvajúcim dlhšie ako 2 týždne začnite alebo znova zapnite spotrebič.
- Ak si prajete užívať slnko (napr. Počas letných prázdnin), odporúčame, aby ste prestali užívať spotrebič týždeň pred dovolenkou a tak dlho, ako budete vystavení slnku.
- Odporúča sa, aby ste si po každom použití nechali aspoň 3 dni ochranu proti slnečnému žiareniu (s minimálnym faktorom ochrany pred slnkom 30).

Kedy by ste prístroj nemali používať?

Za nasledujúcich okolností neodporúčame používať zariadenia:

- na otvorených ranách, vyrážkach, kožných infekciách, lupienke, ekzémoch, zápaloch, popáleninách, ružovke, aktívnych infekciách (napr. Aktívne šarže akné alebo herpesu) v oblastiach, ktoré majú byť liečené;
- Ak sa vaša pokožka stále zotavuje z kozmetického postupu, ako je napríklad chemický alebo mechanický peeling, laserový resurfacing, frakčnej laserové ošetrenie, mezoterapia alebo akákoľvek iná liečba kožnými výplňami v posledných dvoch týždňoch;
- na permanentným make-upu, veľkých pihách alebo materských znaménkach, tetovaniach alebo iných podráždeniach kože v oblastiach, ktoré majú byť ošetrené;
- V kombinácii s inými systémami starostlivosti o pleť pre domáce použitie, ktoré obsahujú aktívne peelingové zložky.
- Ak máte bradavice, nepokúšajte sa ich odstrániť pomocou spotrebiča. To môže spôsobiť šírenie bradavíc.

- Veľké, hnisavé pupienky alebo vredy nemôžu a nemali by byť ošetrované spotrebičom.
- Tehotné ženy a osoby so srdcovým ochorením by tento prístroj nemali používať.
- Prístroj sa nesmie používať v oblasti genitálií.

Kedy je nevyhnutné lekárske poradenstvo?

V nasledujúcich prípadoch sa pred použitím prístroja poraďte so svojim lekárom:

- ak máte jazvy;
- ak užívate lieky, ktoré pôsobia na kožu, napríklad steroidy alebo lieky na akné (Accutane, Izotretinoín alebo Roaccutane);
- Ak máte závažný stav kože

## Zapnutie / Vypnutie

Stlačením spínača zapnutia / vypnutia vyberte úroveň sacieho výkonu. Pri šiestom stlačení tlačidla prístroj vypnete.

Počet stisknutí	Kontrolka	Stupeň
1	Svití	1
2	Blikne 2x	2
3	Blikne 3x	3
4	Blikne 4x	4
5	Blikne 5x	5
6	Nesvití	Vypnuto

## Farby kontrolky znamenajú:

Červená = nabíjanie

Zelená = Nabíjanie dokončené

Modrá = Prevádzkový mód

nabíjanie batérie

**POZNÁMKA:** Prístroj je vybavený ochranou proti hlbokému vybitiu. Tým sa prístroj vypne, ak ešte nie je dostatočne nabitý.

1. Pripojte nabíjací kábel do napájacieho adaptéra.
2. Pripojte napájací adaptér s pripojovacou zásuvkou spotrebiča.
3. Zapojte napájací adaptér do zásuvky v stene. Pred prvým použitím spotrebič spotrebujte 2,5 hodiny.

**POZNÁMKA:**

- Počas nabíjania svieti kontrolka na červeno.
  - Proces nabíjania je ukončený, keď kontrolka svieti na zeleno.
  - Nie je možné použiť iba sieťovú prevádzku.
4. Po úplnom nabití dobíjacie batérie odpojte sieťový adaptér zo zásuvky.

**POZNÁMKA:** Nabíjacie batérie sa aj po vypnutí nepretržite vybíja. Pokiaľ je spotrebič dlhšiu dobu mimo prevádzky, dobite akumulátor aspoň raz za 4 až 8 týždňov.

používanie

**VAROVANIE:** Nebezpečenstvo poranenia!

- Pri prvom použití spotrebiča otestujte nástavec na predlaktí. Vedte prístroj po ruke a počkajte približne hodinu po aplikácii. Pokiaľ dôjde k odznení kožné reakcie, ktorá sa môže objaviť, môžete prístroj použiť na tvári.
- Nepoužívajte prístroj nad a pod očami! Ak ošetrujete jemné línie vedľa očí, zakryte viečko prstom druhej ruky a pohybujte prístrojom od prsta smerom.
- Nepoužívajte priamo na perách a pod nosom.
- Vždy začnite používať najnižšiu úroveň sanie! Príliš veľká sila sania môže spôsobiť hematómy. Saciu silu zvýšte iba postupne.

- Nedotýkajte sa spotrebiča častí kože, akonáhle ho zapnete!

1. Pred každým použitím očistite tvár a úplne ho vysušte. Ak chcete otvoriť póry, môžete si dopredu vziať horúcu parný kúpeľ alebo si na tvári držať teplý, vlhký handričku.
2. Nasadte požadované príslušenstvo. Uistite sa, že na tesnenia neskĺznu.
3. Zapnite prístroj pomocou vypínača. V prípade potreby vyberte inú úroveň sania.
4. Dotknite sa tváre nástavcom, aby ste mohli cítiť účinok sania. Nástavec netlačte príliš na kožu a nedržte ho na jednom mieste! Premiestnite nástavec v jednom smere. Ošetrite všetky oblasti na tvári mimo oblasť očí. V nasledujúcom texte je opísané, ako presunúť zariadenie v každej oblasti:

- Brada: Od stredu von
- Líca: Od nosa smerom k ušiam
- Čelo: od stredu smerom von
- Nos: zhora nadol a pozdĺž nosovej dierky
- U uší: Pozdĺž zdola nahor

#### POZNÁMKA:

- V niektorých oblastiach je ťažšie nadviazať plný kontakt s pokožkou. Snažte sa držať prístroj rôznymi spôsobmi. Premiestnite prístroj zvisle alebo vodorovne, alebo otočte len hlavou, aby ste dosiahli lepšieho kontaktu s pokožkou.
  - Po použití môže byť koža začervenaná. To je normálne a počas niekoľkých hodín by to malo (v závislosti od typu pleti) ustúpiť.
5. Ak chcete zastaviť používanie, vypnite prístroj pomocou vypínača.
  6. Po použití si umyte tvár studenou vodou, aby sa póry znovu zavreli. Nakoniec naneste ošetrovací prípravok s ochranou proti slnečnému žiareniu.

#### Výmena filtračnej huby

Poznámka: Dbajte na správnu montáž tesniacich krúžkov.

1. Vyberte nástavec.
2. Odstráňte uzáver.
3. Odstráňte špinavú filtračnú špongiu pinzetou a vložte novú.
4. Uzavrite uzáver a nástavec.

#### čistenie

#### VAROVANIE:

- Pred čistením prístroj vypnite. Odpojte napájací adaptér z elektrickej zásuvky.
- Spotrebič neponárajte do vody!
- Napájací adaptér neponárajte do vody!

#### POZOR:

- Nečistite spotrebič pod tečúcou vodou! Elektronika by sa mohla poškodiť.
- Nepoužívajte drôtenú kefu alebo iné brúsne materiály.
- Nepoužívajte ostré alebo abrazívne čistiace prostriedky.
- V prípade potreby vyčistite kryt mierne navlhčenou handričkou.
- Sieťový adaptér vždy čistite suchou handričkou.
- Prístroje očistite jemným mydlovým roztokom. Nakoniec ho opláchnite vodou. Pred opakovaným použitím nechajte zariadenie úplne vyschnúť.

POZNÁMKA: Odporúčame, aby ste príslušenstvo ošetrili bežne dostupným dezinfekčným prostriedkom.

- Filtračné špongiu možno čistiť teplou tečúcou vodou. Pred opakovaným použitím nechajte huby na filtre úplne vyschnúť. Ak je filtračná huba veľmi znečistená, vymeňte ju.

uloženie

- Odporúčame ponechať spotrebič v pôvodnom obale, ak ho nebudete dlhšiu dobu používať. Pred tým vyberte batérie / dobíjacie batérie.

- Prístroj vždy skladujte mimo dosahu detí na suchom, dobre vetranom mieste.

### technické údaje

Model: ..... PC-PR 3025

Čistá váha: ..... približne 148 g

Trieda ochrany: ..... III

Vstup: ..... DC 5,0 V, 1000 mAh

napájací adaptér

Trieda ochrany: ..... II

Vstup: ..... AC 100-240 V, 50/60 Hz, 0,3 A

Výstup: ..... DC 5,0 V, 1000 mAh

akumulátor

Parametre: ..... 1 x 3,7 V, 500 mAh Li-Ion

Doba prevádzky: ..... približne 45 min.

Doba nabíjania: ..... približne 2,5 hod.

Právo vykonávať v priebehu neustáleho vývoja produktu technické zmeny a zmeny dizajnu zostáva aj naďalej vyhradené. Tento spotrebič bol testovaný podľa všetkých aktuálnych platných smerníc CE, ako sú napr. Smernice o elektromagnetickej kompatibilite a nízkom napätí, a bol navrhnutý podľa najnovších bezpečnostných nariadení.

### Likvidácia

Význam symbolu "odpadkového koša" Chráňte naše životné prostredie: nevyhadzujte elektrické spotrebiče do domáceho odpadu.

Vráťte, prosím, akýkoľvek elektrický spotrebič, ktorý už nebudete používať, do zberníc, ktoré sa zaoberajú ich likvidáciou. Pomôžete tým zabrániť negatívnym vplyvom nesprávnej likvidácie na životné prostredie a ľudské zdravie. Prispejete k recyklácii a ostatných formám opakovaného použitia elektrických a elektronických zariadení. Informácie týkajúce sa miest, kde možno takéto zariadenia zlikvidovať, je možné získať na miestnom úrade.