

# beurer HD 50

H



**H** Melegítőgallér  
Melegítő takaró  
Használati utasítás

## Tartalom

1. Csomagolás tartalma .....	3	4.4 Hőmérséklet beállítása .....	5
1.1 A készülék ismertetése .....	3	4.5 Kikapcsolás .....	6
2. Fontos tudnivalók		4.6 Automatikus kikapcsolás .....	6
Őrizz meg a későbbi használatához .....	3	5. Tisztítás és ápolás .....	6
3. Rendeltetésszerű alkalmazás .....	5	6. Tárolás .....	7
4. A készülék kezelése .....	5	7. Ártalmatlanítás .....	7
4.1 Biztonság .....	5	8. Mi a teendő probléma esetén? .....	7
4.2 Üzembehelyezés .....	5	9. Műszaki adatok .....	7
4.3 Bekapcsolás .....	5		

## Ábramagyarázat

	Az útmutatások elolvasása!		Mosógépben mosható extra kímélő programmal 30 °C fokon
			Ne fehéritse
	Ne szúrjon bele tűt!		Ne szárítsa szárítógépben
			Ne vasalja
	Ne használja összehajtogatva vagy összegyűrve!		Vegyitisztításra nem alkalmas
	3 év alatti gyermekek számára nem ajánlott.		Az ennél a készüléknél használt textilíak teljesítik az Öko-Tex szabvány 100 magas humánökológiai előírásait, amint ezt a Forschungsinstitut Hohenstein (Hohenstein Kutatóintézet) igazolja.
	<b>FIGYELMEZTETÉS;</b> Figyelmeztetés a sérülésveszélyekre, vagy az Ön egészségére leselkedő veszélyekre.		
	<b>FIGYELEM;</b> Biztonsági utalás a készülék/tartozék lehetséges károsodásaira.		




## MERJEGYZÉS; Utalás a fontos információkra.

### 1. Csomagolás tartalma

- 1 Melegítógallér/Melegítő takaró
- 1 Kapcsoló
- 1 Használati útmutató

#### 1.1 A készülék ismertetése

- 1. Hálózati dugasz
- 2. Hálózati vezeték
- 3. Kapcsoló
- 4. Ellenőrző lámpa
- 5. Tolókapcsoló a BE-/KI-kapcsoláshoz és a hőmérséklet-fokozatokhoz
- 6. Dugaszos csatlakozó

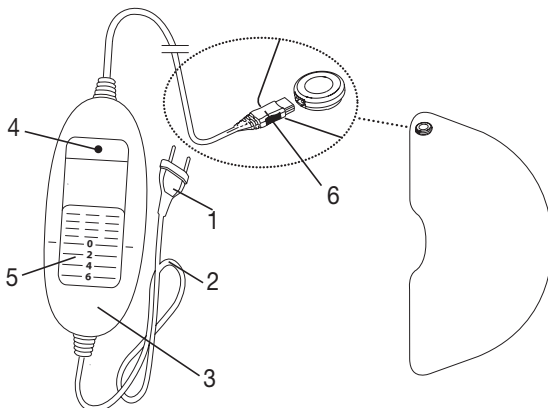

Vegye figyelembe a következőket: A HD 50 melegítőtakaróként vagy melegítógallérrént használható. A következő használati utasításban mindkét alkalmazásra vonatkozóan a „melegítőtakaró” fogalmat használjuk. Az utasítások ugyanúgy érvényesek a melegítógallérrént történő használatra is.

## 2. Fontos tudnivalók

### Őrizze meg a későbbi használatához



#### FIGYELMEZTETÉS

- A következő utasítások figyelmen kívül hagyása személyi sérüléseket vagy anyagi károkat (áramütés, a bőr megégése, tűz) okozhat. A következő biztonsági és veszélyességi megjegyzések nem csak az Ön vagy harmadik személyek egészségének védelmét, hanem a termék védelmét is szolgálják. Vegye figyelembe ezért ezeket a biztonsági tudnivalókat és adja át ezt az útmutatót a készülék továbbadása esetén.
- Ez a melegítő takaró nem használható megre érzéketlen vagy más, nagyon segítségre szoruló személyeknél, mivel ők a túlmelegedésre nem tudnak reagálni.
- Ez a melegítő takaró nem használható nagyon fiatal gyermekeknél (0-3 év), mivel ők a túlmelegedésre nem tudnak reagálni.
- Ez a melegítő takaró nem használható fiatal gyermekeknél (3-8 év), hacsak a kapcsolót nem egy szülő vagy felügyelő személy állította be, és a gyermeket megfelelő módon kioktatták a melegítő takaró biztonságos használatáról.
- A melegítő takarót 8 éves és annál idősebb gyerekek valamint korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel, vagy hiányos

tapasztalattal és tudással rendelkező személyek csak felügyelet mellett használhatják, vagy ha a készülék biztonságos használatáról kioktatták őket, és az abból eredő veszélyekkel tisztában vannak.

- Gyermekek nem játszhatnak a melegítő takaróval.
- A tisztítást és a felhasználó általi karbantartást felügyelet nélkül hagyott gyermek nem végezheti.
- Ez a melegítő takaró nem kórházban történő használatra szolgál.
- Ne szúrjon bele tűt.
- Ne használja összehajtva vagy összetolva.
- Ne használja nedvesen.
- Ez a melegítő takaró csak a címkén megadott kapcsolóval működtethető.
- A melegítő takaró kiinduló villamos és mágneses mezők adott körülmények között zavarhatják szívritmus-szabályozójának működését. Ezek azonban messze a határértékek alatt vannak: elektromos térerő: max. 5 000 V/m, mágneses térerő: max. 80 A/m, mágneses fluxussűrűség: max. 0,1 millitesla. Kérjük, kérdezze meg orvosát vagy szívritmus-szabályozójának gyártóját e melegítő takaró használata előtt.
- A melegítő takaróra bekapcsolt állapotban tilos
  - más tárgyat (pl. bőrdöngőt vagy ruháskosarat) ráhelyezni,
  - hőforrást, pl. ágymelegítő palackot, melegítő párnát vagy hasonló eszközt ráhelyezni.
- A kapcsolóban lévő elektromos alkatrészek felmelegednek a melegítő takaró használatkor.  
A kapcsolót ezért nem szabad letakarni, vagy a melegítő takaróra helyezni használat közben.
- Ne a vezetéknél fogva húzza ki a csatlakozót, ne tekerje vagy törje meg a vezetéket.
- Ellenőrizze gyakran a melegítő takarót arra vonatkozóan, hogy nem mutatkoznak-e rajta az elhasználódás vagy károsodás jelei.  
Ilyen jelek esetén, ha szakszerűtlenül használták a melegítő takarót vagy már nem melegít, az újbóli bekapcsolás előtt a gyártóval át kell vizsgáltatni.
- Ha megsérült a melegítő takaró hálózati csatlakozó vezetéke, akkor azt a veszélyek elkerülése érdekében a gyártó céggel, annak ügyfélszolgálatával vagy hasonlóan minősített szakemberrel ki kell cseréltetnie.
- Feltétlenül vegye figyelembe a kezelésre (4. fejezet), a tisztításra és ápolásra (5. fejezet), és a tárolásra (6. fejezet) vonatkozó tudnivalókat.
- Ha kérdései vannak a készülékeink használatával kapcsolatban, akkor kérjük, forduljon az ügyfélszolgálathoz.

### 3. Rendeltetés szerű alkalmazás



#### FIGYELEM

Ez a melegítő takaró csak az emberi test melegítésére szolgál.

A melegítőtakaró úgy van kialakítva, hogy körgallérrként is viselhető legyen. A melegítőtakaró melegítőgallér sötét színű felületét kell a test felé fordítani. A melegítőgallér patentkapcsokkal elől összezárható. Ezen kívül a karok környékén további patentkapcsok találhatóak, hogy a melegítőgallért jobban lehessen rögzíteni a testen (lásd az ábrát).



### 4. A készülék kezelése

#### 4.1 Biztonság




#### FIGYELEM

Ez a melegítő takaró BIZTONSÁGI RENDSZERREL van felszerelve. Ez az elektronikus érzékelő technika hiba esetén automatikus lekapcsolással megakadályozza a melegítő takaró túlmelegedését annak teljes felületén.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a melegítő takaró hiba esetén biztonsági okokból már nem használható és azt a szerviz megadott címére be kell küldeni.

#### 4.2 Üzembehelyezés

- Kösse össze először a kapcsolót a melegítő takaróval oly módon, hogy a dugaszos csatlakozót összeilleszti.
- Ezt követően dugja be a hálózati dugaszt a fali aljzatba.

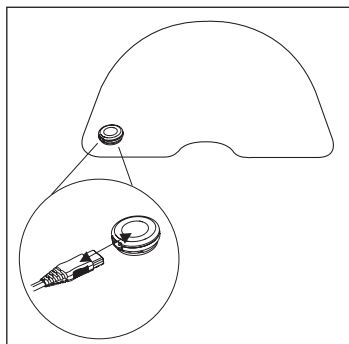

#### 4.3 Bekapcsolás

A melegítő takaró bekapcsolásához állítsa a BE/KI és hőmérséklet-fokozat tolókapcsolót az 1., 2., 3., 4., 5. vagy 6. fokozatra.

Bekapcsolt állapotban az ellenőrző lámpa világít (4).

#### 4.4 Hőmérséklet beállítása

0. fokozat: KI

1. fokozat: Minimális hőfok

2. - 5. fokozat: Egyedi hőfok

6. fokozat: Maximális hőfok



## FIGYELMEZTETÉS

Ha a melegítő takarót több órán keresztül használja, javasoljuk a legalacsonyabb hőmérséklet-fokozat beállítását a kapcsolón a felhasználó túlmelegedésének elkerülésére.



### MEGJEGYZÉS

Akkor melegítheti fel leggyorsabban a melegítő takarót, ha először a legmagasabb hőmérséklet-fokozatot állítja be.

## 4.5 Kikapcsolás

A melegítő takaró kikapcsolásához állítsa a BE/KI és hőmérséklet-fokozat tolókapcsolót KI (0) állásba.



### MEGJEGYZÉS

Ha a melegítő takarót néhány napig nem használja, állítsa a BE/KI és hőmérséklet-fokozat tolókapcsolót KI (0) állásba és húzza ki a hálózati dugaszt az aljzatból. Válassza le ezután a dugaszos csatlakozót és ezáltal a kapcsolót a melegítő takaróról.

## 4.6 Automatikus kikapcsolás

A melegítő takaró 3 óra után automatikusan kikapcsol. Kikapcsolás után a melegítő takaró már nem melegszik tovább és az ellenőrzőlámpa villog.

A melegítő takaró újbóli bekapcsolásához állítsa a BE/KI és hőmérséklet-fokozat tolókapcsolót először 5 másodpercig a KI (0) állásba. Nagyjából 5 másodperc után újra bekapcsolhatja a készüléket.

## 5. Tisztítás és ápolás



### FIGYELMEZTETÉS

Tisztítás előtt mindig húzza ki előbb a hálózati dugaszt az aljzatból. Válassza le ezután a dugaszos csatlakozót és ezáltal a kapcsolót a melegítő takaróról. Ellenkező esetben fennáll az áramütés veszélye.



### FIGYELEM

- A kapcsoló soha nem érintkezhet vízzel vagy más folyadékkal. Ellenkező esetben megrongálódhat.

Száraz, nem bolyhozódó kendőt használjon a kapcsoló tisztításához. Ne használjon vegyi tisztítókat vagy súrolószert.

A melegítő takarón lévő kisebb foltok egy megnedvesített kendővel vagy szivaccsal, valamint adott esetben kevés folyékony finom mosószerezrel távolíthatók el.



### FIGYELEM

- Kérjük, vegye figyelembe, hogy a melegítő takarót tilos vegyileg tisztítani, kicsavarni, géppel szárítani, mángorolni vagy vasalni.

Ez a melegítő takaró mosógépben mosható.

Állítson be a mosógépen egy különösen kímélő mosóprogramot 30 °C-on (teljes mosóprogram).

Használjon finom mosószert, és a gyártó cég előírásai szerint adagolja.



## FIGYELEM

- Kérjük, vegye figyelembe, hogy a melegítő takarót a túl gyakori mosás igénybe veszi.

Ezért a készüléket annak teljes élettartama alatt legfeljebb 5-ször mossa ki mosógépben.

Húzza ki közvetlenül a mosás után a még nedves melegítő takarót eredeti méretére és alakjára, és hagyja egy ruhaszárítón laposan kiterítve megszáradni.



## FIGYELEM

- Ne használjon ruhacsipeszeket vagy hasonló eszközt a melegítő takaró ruhaszárítóra rögzítéséhez. Ellenkező esetben a melegítő takaró megsérülhet.
- Csak akkor kösse össze a kapcsolót a melegítő takaróval, ha a dugaszos csatlakozó és a melegítő takaró teljesen száraz. Ellenkező esetben a melegítő takaró megsérülhet.



## FIGYELMEZTETÉS

- Semmi esetre se kapcsolja be a készüléket azért, hogy megszáradjon! Ellenkező esetben fennáll az áramütés veszélye.

## 6. Tárolás

Ha hosszabb időn keresztül nem kívánja használni a melegítő takarót, akkor javasoljuk, hogy az eredeti csomagolásában tárolja azt.



## FIGYELEM

Kérjük, hagyja először a melegítő takarót lehűlni. Ellenkező esetben a melegítő takaró megsérülhet. Tároláskor semmilyen tárgyat se tegyen a melegítő takaróra, hogy elkerülje az éles megtörését.

## 7. Ártalmatlanítás

A készüléket az Európai Uniónak az elhasznált elektromos és elektronikus készülékekre vonatkozó – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) jelű irányelve szerint ártalmatlanítsa. Esetleges további kérdéseivel forduljon a hulladékkezelésben illetékes helyi szervekhez.



## 8. Mi a teendő probléma esetén?

Probléma	Ok	Elhárítás
Az ellenőrzőlámpa nincs megvilágítva, miközben - a kapcsoló teljesen össze van kötve a melegítő takaróval - a hálózati dugasz egy működő fali aljzattal van összekötve - a BE/KI és hőmérséklet-fokozat tolopkapcsoló az 1., 2., 3., 4., 5. vagy 6. fokozaton áll	A biztonsági rendszer a melegítő takarót visszafordíthatatlanul lekapcsolta.	Küldje be a melegítő takarót és a kapcsolót a szervizbe.

## 9. Műszaki adatok

Lásd a típustábla-címkét a melegítő takarón.

